

# Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode

Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode on tarkoitettu käytettäväksi Bittium Faros -laitteen kanssa EKG-signaalin mittaamiseen.

## Tarvikkeet



Bittium  
Faros™



Bittium  
OmegaSnap™  
Adapter



Bittium  
OmegaSnap™  
1-CH ECG  
Electrode

## Huomioitavaa

- › Elektrodi tulee laittaa vahingoittumattomalle, puhtaalle iholle.
- › Älä käytä kosteusvoiteita tai kosmetiikkatuotteita elektrodin ihoalueella ennen elektrodin kiinnittämistä.
- › Älä käytä vanhentuneita elektrodeja. Tarkista päiväys pakkauksesta.
- › Elektrodi on kertakäyttöinen. Uudelleenkäyttö voi johtaa esim. infekioon.
- › Irrota elektrodi ja lopeta laitteen käyttö, jos ne aiheuttavat ihoärsytystä. Ongelmatilanteissa ota yhteys hoitavaan lääkäriin tai sairaanhoitajaan.
- › Elektrodi tulee vaihtaa, jos se ei pysy ihollla.
- › Poista elektrodi iholta mittauksen jälkeen.
- › Elektrodia tulee käyttää vain Bittium Faros -laitteen kanssa.
- › Faros-laite ja OmegaSnap-adaptteri tulee puhdistaa käytön jälkeen. Suositeltu puhdistustapa: alkoholittomat puhdistus- ja desinfiointiliinat lääketieteellisille laitteille (esimerkiksi mikrozyd® tai SaniCloth AF3).
- › Seuraa näitä käyttöohjeita. Lisätietoa Faros-laitteen ohjeessa.

# Bittium



Bittium Biosignals Oy  
Pioneerinkatu 6  
70800 Kuopio, FINLAND




Puh: +358 (0)40 3442000  
sähköposti: bbs@bittium.com tai  
medical.support@bittium.com


[www.bittium.com](http://www.bittium.com)

# Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode

## Pikaohje

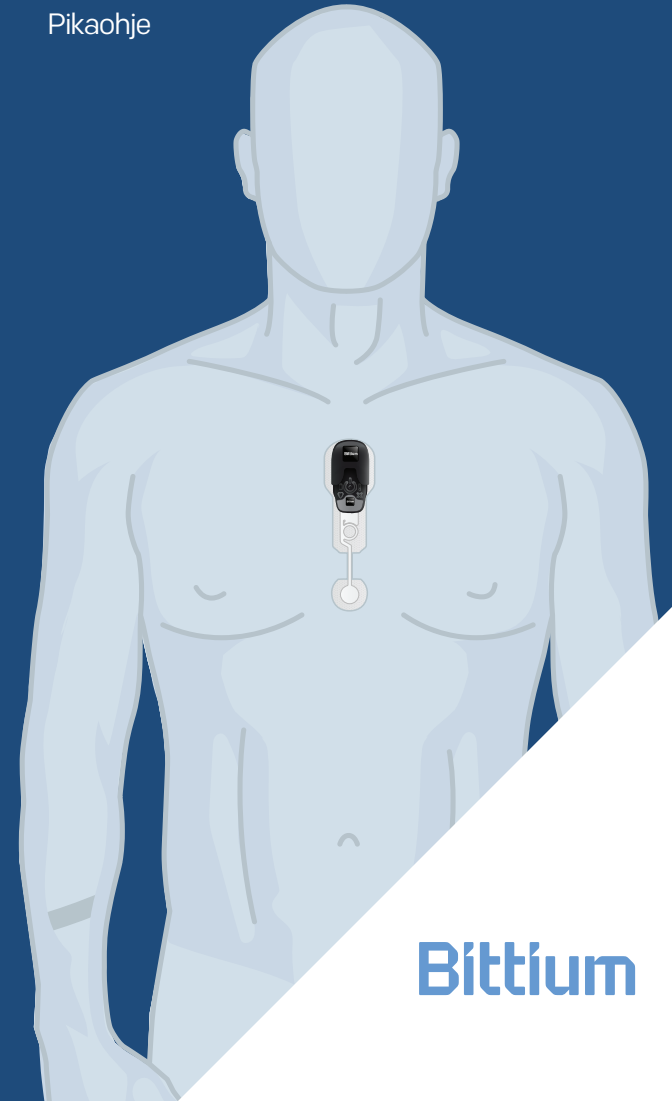


# Bittium

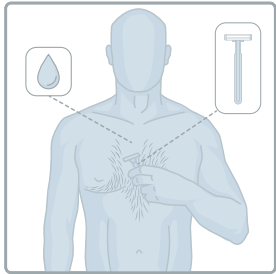

1.



Poista iohkarvat tarvittaessa. Puhdista iho hoitavan lääkäriin tai klinikan ohjeiden mukaan. Ihon tulee olla puhdas ja kuiva ennen elektrodin kiinnittämistä.

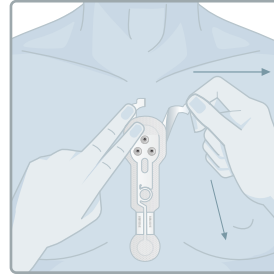

5.


Kun yläreuna on hyvin kiinnitetty, poista suojakalvo sivuilta (numero 2). Kiinnitä osiot ihoon yksi kerrallaan ja varmista että ne kiinnittyvät ihoon.

2. Varmista, että elektrodipakkaus on avaamaton ja päivitys on voimassa. Avaa pussi ja ota elektrodi ulos.

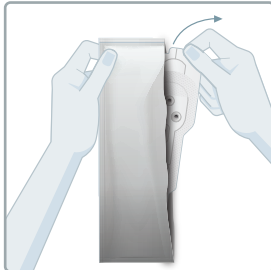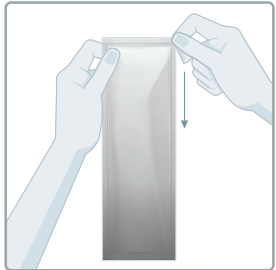


6.

Varmista, ettei Faros-laitteessa ja OmegaSnap-adapterissa ole vaurioita\*. Yhdistä Faros-laite adapteriin. Kiinnitä adapteri elektrodiin. Paina adapteria elektrodiin vasten varmistaaksesi, että kaikki nepparit ovat kiinnitettyinä.

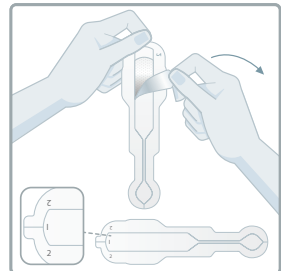


3.

Irrota tarrapinnan suojakalvo (numero 1). Älä koske tarrapintaan.

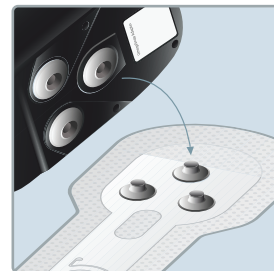


4.

Kiinnitä elektrodin yläosa iholle. Elektrodin yläreuna tulee noin kahden sormen leveyden verran kaulakuopan alapuolelle. Optimaalisen signaalin laadun varmistamiseksi on tärkeintä, että koko elektrodi on rintalastan päällä ja alareuna pallean yläpuolella.

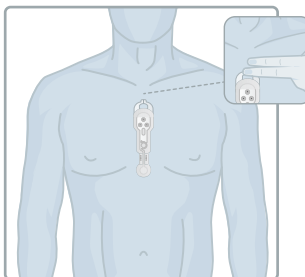


7.

Paina ja vapauta virtanappi aloittaaksesi mittauksen. Merkkiäsi ja vilkkuva vihreä valo tarkoittavat, että mittaus on alkanut.


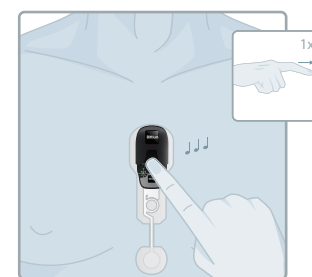


8.

Kun haluat lopettaa mittauksen paina virtanappia noin 8 sekunnin ajan, kunnes kuulet kolme piippausta ja vilkkuva merkkivalo sammuu.

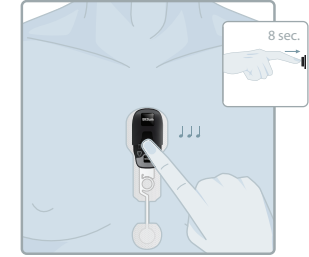

9. Irrota laite ja adapteri elektrodista. Irrota elektrodi ihosta ottamalla kiinni tarrapinnan reunasta ja vetämällä varovasti alaspäin kunnes koko elektrodi on irti. Käytä tarvittaessa apuna saippuavettä. Hävitä elektrodi käytön jälkeen. Palauta Faros-laite ja adapteri hoitavalle lääkärielle tai klinikalle.

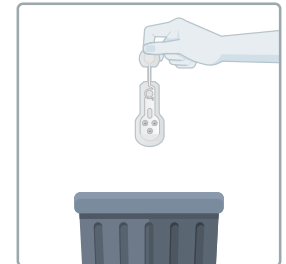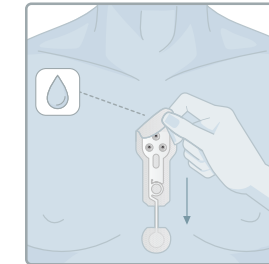

## Symbolit

CE CE-merkki

Kertakäyttöinen

Valmistuspäivä

Eräkoodi

Valmistaja

Viimeinen käyttöpäivä

Seuraa käyttöohjetta

Lääkinnällinen laite