

# Bittium OmegaSnap™ 2-CH ECG Electrode

Bittium OmegaSnap™ EKG-elektroden med to kanaler er beregnet for bruk sammen med Bittium Faros™ 360-enheten til måling av EKG-signal.


## Utstyr



Bittium  
Faros™  
360



Bittium  
OmegaSnap™  
Multi-CH  
Adapter

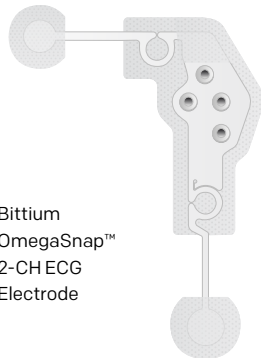

Bittium  
OmegaSnap™  
2-CH ECG  
Electrode

## Merk

- ▶ Elektroden må festes på ren og uskadet hud.
- ▶ Ikke bruk fuktighetskrem eller kosmetikkprodukter på elektrodens hudområde før du fester elektroden.
- ▶ Ikke bruk foreldede elektroder. Sjekk utløpsdatoen på pakningen.
- ▶ Elektroden er for engangsbruk. Gjenbruk kan for eksempel føre til infeksjoner.
- ▶ Ta løs elektroden og avslutt bruken av enheten dersom det oppstår hudirritasjon. Kontakt legen eller sykepleieren din ved problemsituasjoner.
- ▶ Elektroden må skiftes ut dersom den løsner fra huden.
- ▶ Fjern elektroden fra huden etter målingen.
- ▶ Elektroden skal kun brukes sammen med Bittium Faros-enheten.
- ▶ Faros-enheten og OmegaSnap -adapteren skal rengjøres etter bruk. Anbefalt rengjøringsmåte: alkoholfrie rense- og desinfiseringskluter for medisinsk utstyr (som for eksempel mikroZid® eller SaniCloth AF3).
- ▶ Følg denne bruksanvisningen. Mer informasjon om Faros-enheten i instruksjonene.

# Bittium



Bittium Biosignals Oy  
Pioneerinkatu 6  
70800 Kuopio, FINLAND




Tlf: +358 (0)40 3442000  
e-post: bbs@bittium.com tai  
medical.support@bittium.com

[www.bittium.com](http://www.bittium.com)


Copyright © 2024-09-07 Bittium. Alle rettigheter forbeholdt. Dokumentnummer: P0000021697

# Bittium OmegaSnap™ 2-CH ECG Electrode


Hurtigguide

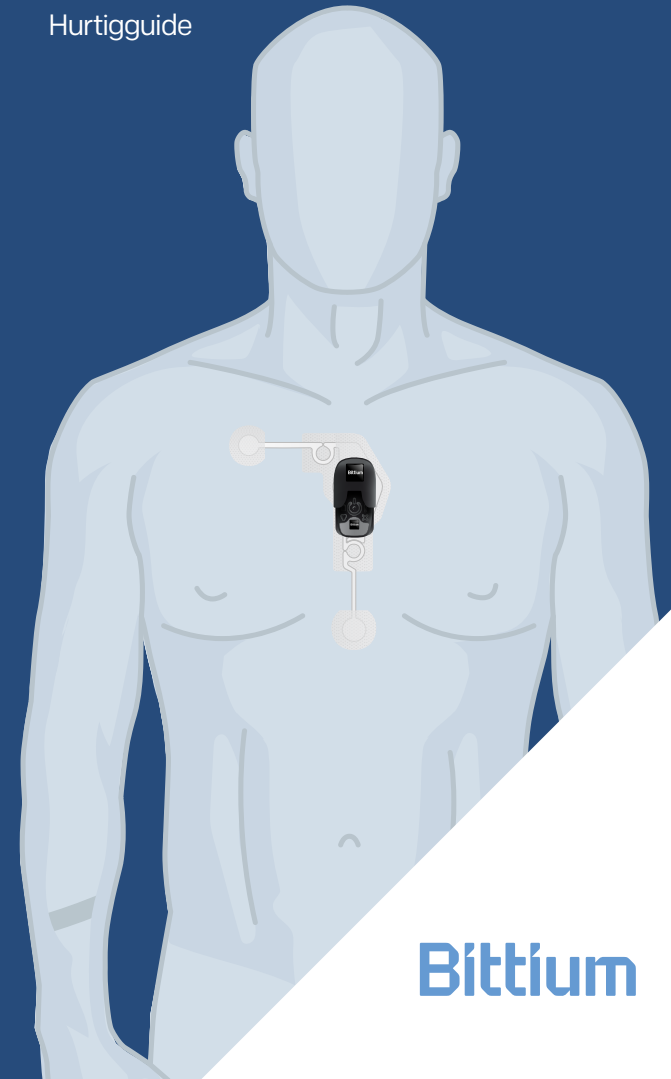

# Bittium


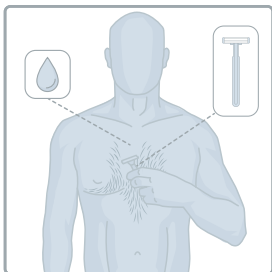


**1.** Fjern hårvekst ved behov. Rengjør huden ved å følge instruksjonene fra legen eller klinikken. Huden må være ren og tørr for du fester elektroden.

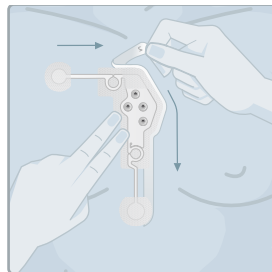


**5.** Når den første delen av elektroden er godt festet, fjerner du den andre beskyttelsesfilmen (nummer 2) og fester resten av elektroden på huden.



**2.** Forsikre deg om at elektrodepakken er uåpnet og datoen er gyldig. Åpne posen og ta ut elektroden.

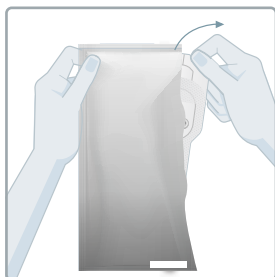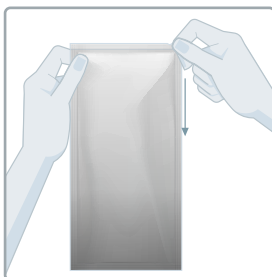


**6.** Forsikre deg om at det ikke er skader på Faros-enheten og OmegaSnap-adapteren\*. Koble Faros-enheten til adapteren. Fest adapteren til elektroden. Press adapteren mot elektroden for å sikre at alle trykknappene er festet.

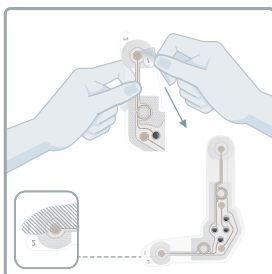


**3.** Fjern beskyttelsesfilmen på tapen (nummer 1). Ikke berør tapeoverflaten.

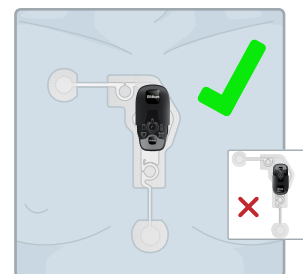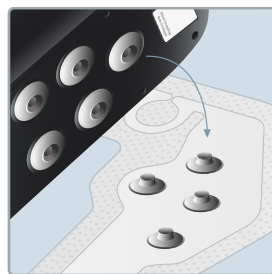


**4.** Fest elektroden på huden. Den øvre kanten av elektroden skal være i en avstand på bredden av to fingre ned fra halsgropen. Elektrodens øvre forgrening skal plasseres nedenfor høyre krageben og den nedre kanten ovenfor mellomgulvet.

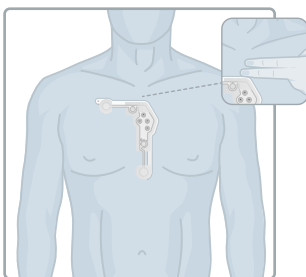



**7.** Trykk på og frigjør strømknappen for å starte målingen. Signallydet og det grønne blinkende lyset betyr at målingen har startet.

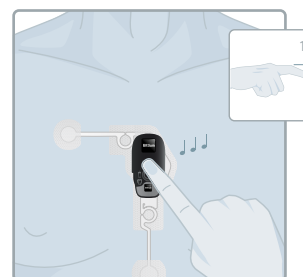

**8.** Når du vil avslutte målingen, trykker du på strømknappen i ca. 8 sekunder til du hører tre pipelyder og signallampen slutter å blinke.

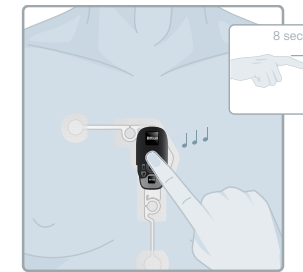

**9.** Løsne enheten og adapteren fra elektroden. Løsne elektroden fra huden ved å ta tak i kanten av tapen og dra den forsiktig nedover til hele elektroden har løsnet. Bruk ved behov såpevann. Kast elektroden etter bruk. Returner Faros-enheten og adapteren til legen din eller klinikken.

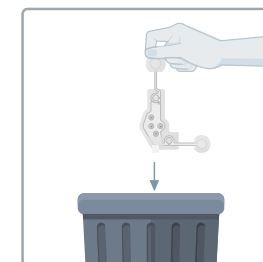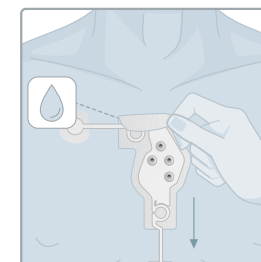

## Symboler

CE CE-merke

For engangsbruk

Produksjonsdato

LOT Partikode

Produsent

Siste bruksdato

Følg bruksanvisningen

MD Medisinsk utstyr