

Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode

Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode er beregnet for bruk sammen med Bittium Faros™ -enheten til måling av EKG-signal.

Utstyr



Bittium
Faros™



Bittium
OmegaSnap™
Adapter



Bittium
OmegaSnap™
1-CH ECG
Electrode

Merk

Elektroden må festes på ren og uskadet hud.

Ikke bruk fuktighetskrem eller kosmetikkprodukter på elektrodens hudområde før du fester elektroden.

Ikke bruk foreldede elektroder. Sjekk utløpsdatoen på pakningen.

Elektroden er for engangsbruk. Gjenbruk kan for eksempel føre til infeksjoner.

Ta løs elektroden og avslutt bruken av enheten dersom det oppstår hudirritasjon. Kontakt legen eller sykepleieren din ved problemsituasjoner.

Elektroden må skiftes ut dersom den løsner fra huden.

Fjern elektroden fra huden etter målingen.

Elektroden skal kun brukes sammen med Bittium Faros-enheten.

Faros-enheten og Omeaganap-adapteren skal rengjøres etter bruk. Anbefalt rengjøringsmåte: alkoholfrie rense- og desinfiseringskluter for medisinsk utstyr (som for eksempel mikrozyd® eller SaniCloth AF3).

Følg denne bruksanvisningen. Mer informasjon om Faros-enheten i instruksjonene.

Bittium



Bittium Biosignals Oy
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio, FINLAND




Tlf: +358 (0)40 3442000
e-post: bbs@bittium.com eller
medical.support@bittium.com

www.bittium.com


Copyright © 2024-09-27 Bittium. Alle rettigheter forbeholdt. Dokumentnummer: P0000021696

Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode

Hurtigguide

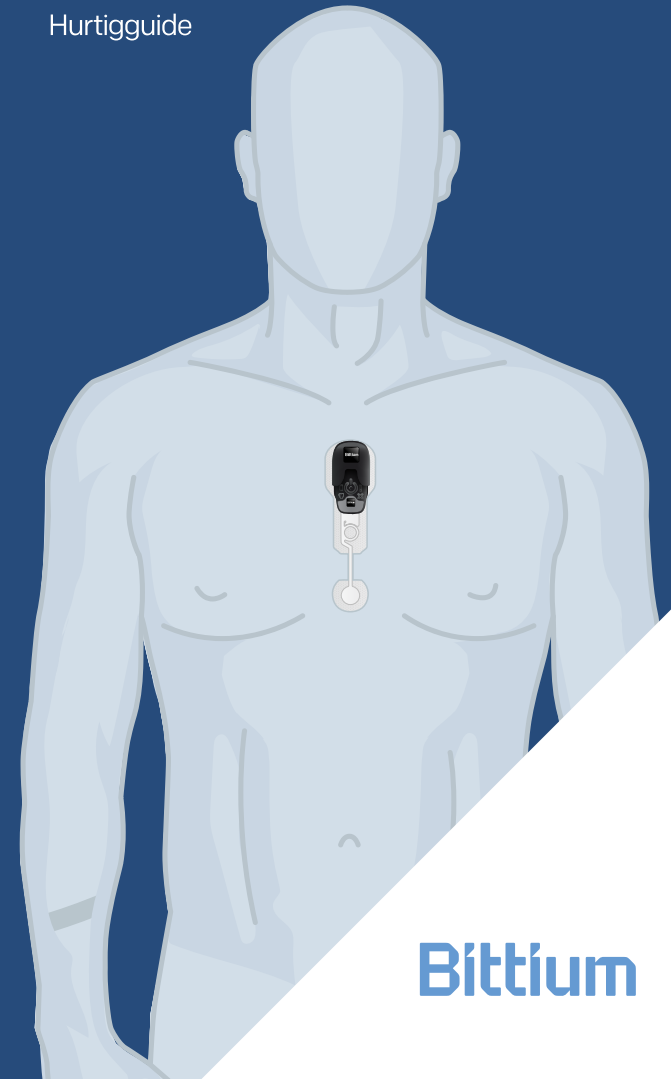


Bittium

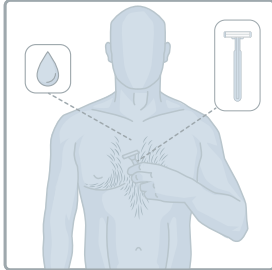

1.



Fjern hårvekst ved behov. Rengjør huden ved å følge instruksjonene fra legen eller klinikken. Huden må være ren og tørr før du fester elektroden.

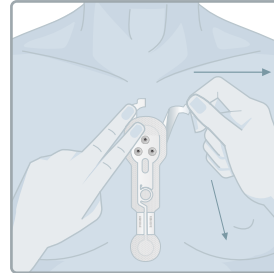

5.


Når den øvre kanten er godt festet, fjerner du beskyttelsesfilmen på sidene (nummer 2). Fest delene på huden én om gangen, og forsikre deg om at de fester seg på huden.

2. Forsikre deg om at elektrodepakken er uåpnet og datoen er gyldig. Åpne posen og ta ut elektroden.

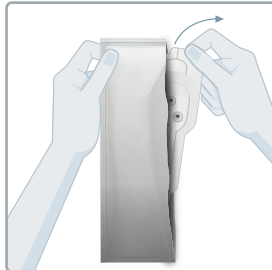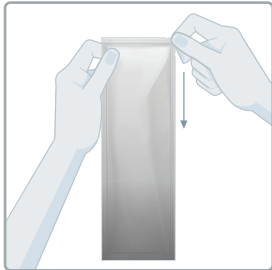


6.

Forsikre deg om at det ikke er skader på Faros-enheten og OmegaSnap-adapteren*. Koble Faros-enheten til adapteren. Fest adapteren til elektroden. Press adapteren mot elektroden for å sikre at alle trykknappene er festet.

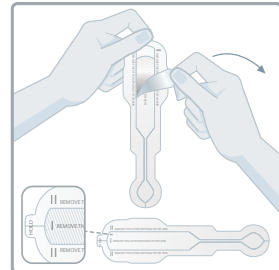


3.

Fjern beskyttelsesfilmen på tapen (nummer 1). Ikke berør tapeoverflaten.

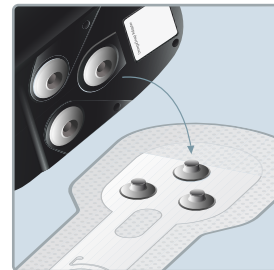


4.

Fest den øvre delen av elektroden på huden. Den øvre kanten av elektroden skal være i en avstand på bredden av to fingre nedenfor halsgropen. For å sikre en optimal kvalitet på signalet er det viktigst at hele elektroden ligger på brystbenet og den nedre kanten rett over mellomgulvet.

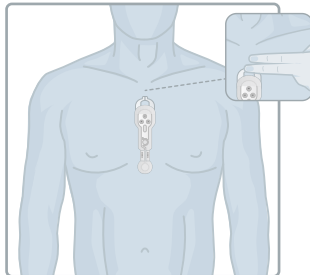


7.

Trykk på og frigjør strømknappen for å starte målingen. Signallyden og det grønne blinkende lyset betyr at målingen har startet.


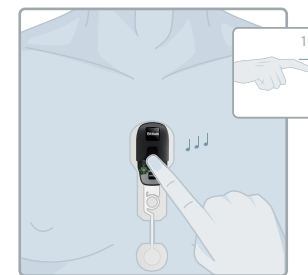


8.

Når du vil avslutte målingen, trykker du på strømknappen i ca. 8 sekunder til du hører tre pipelyder og den blinkende signallampen slokner.

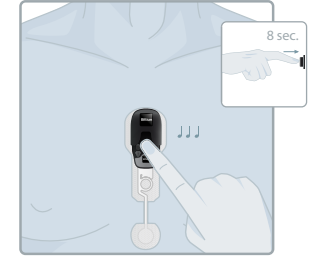

9. Løsne enheten og adapteren fra elektroden. Løsne elektroden fra huden ved å ta tak i kanten av tapen og dra den forsiktig nedover, til hele elektroden har løsnet. Bruk ved behov såpevann. Kast elektroden etter bruk. Returner Faros-enheten og adapteren til legen din eller klinikken.

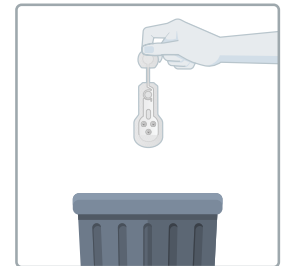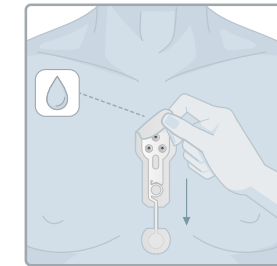

Symboler

CE CE-merke

For engangsbruk

Produksjonsdato

Partikode

Produsent

Siste bruksdato

Følg bruksanvisningen

Medisinsk utstyr