

Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode

Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode är avsedd att användas med enheten Bittium Faros för att mäta EKG-signaler.

Tillbehör



Bittium
Faros™



Bittium
OmegaSnap™
Adapter



Bittium
OmegaSnap™
1-CH ECG
Electrode

Observera

Elektroden ska appliceras på frisk och ren hud.

Använd inte fuktighetskrämer eller kosmetikprodukter på hudområdet där du fäster elektroden.

Använd inte gamla elektroder. Kontrollera datumet på förpackningen.

Elektroden är avsedd för engångsbruk. Återanvändning skulle exempelvis kunna leda till infektion.

Ta bort elektroden om den förorsakar hudirritation. Vid problem kontakta behandlande läkare eller sjuksköterska.

Elektroden måste bytas ut om den lossnar från på huden.

Ta bort elektroden efter mätningen.

Elektroden ska bara användas tillsammans med Bittium Faros-enheten.

Faros-enheten och OmegaSnap-adaptorn ska rengöras efter användning. Rekommenderat rengörings sätt: alkoholfria rengörings- och desinfektionsdukar för medicinska produkter (till exempel mikroZid® eller SaniCloth AF3).

Var god följ dessa bruksanvisningar. Mer information finner man i manualen för Faros-enheten.

Bittium



Bittium Biosignals Oy
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio, FINLAND




Tel: +358 (0)40 3442000
e-post: bbs@bittium.com eller
medical.support@bittium.com


www.bittium.com

Bittium OmegaSnap™ 1-CH ECG Electrode

Snabbguide

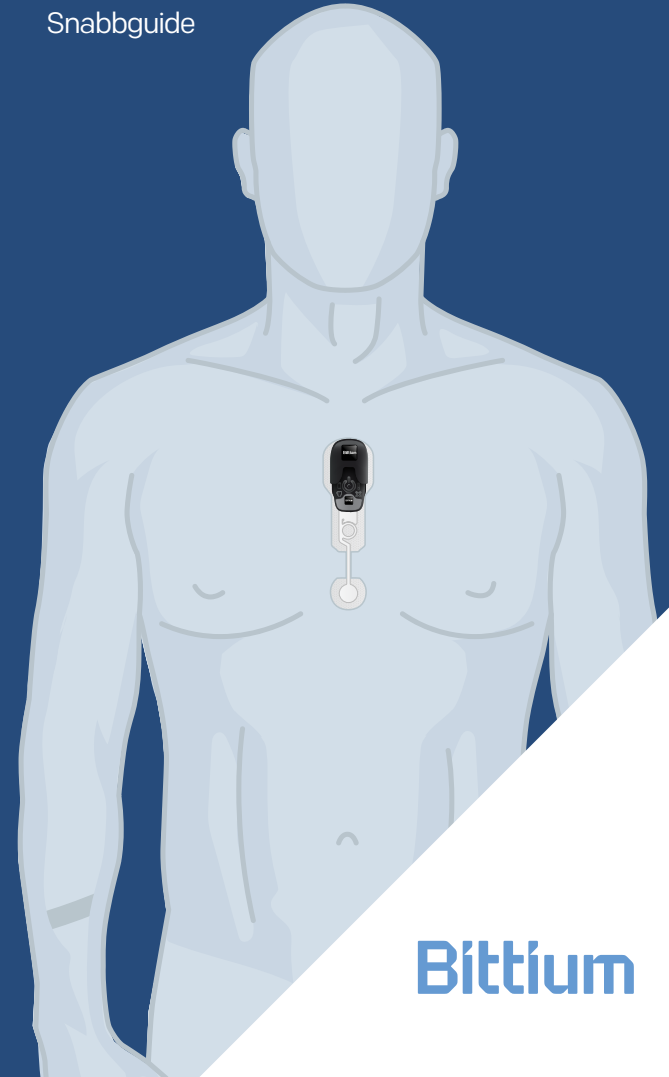


Bittium

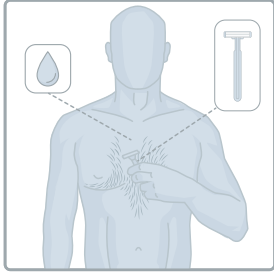


1.

Ta bort kroppsbehåring vid behov. Tvätta huden enligt behandlande läkarens eller kliniken anvisning. Huden ska vara ren och torr när elektroden appliceras.

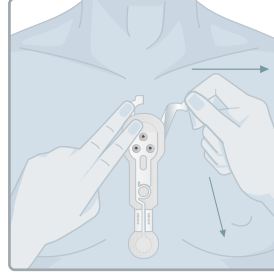

5.



När den övre kanten sitter väl, dra bort skyddsfilm från sidorna (nummer 2). Fäst delarna en åt gången på huden och se till att de fäster mot huden.

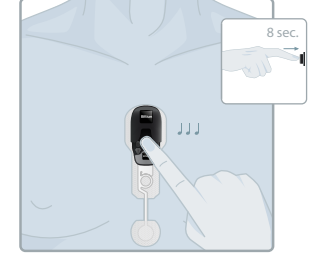

8.


När du vill avsluta mätningen, tryck på mittenknappen i cirka 8 sekunder tills du hör tre pip och det blinkande signalljuset slocknar.

2. Kontrollera att elektrodförpackningen är öppnad och att datumet är giltigt. Öppna påsen och ta ut elektroden.

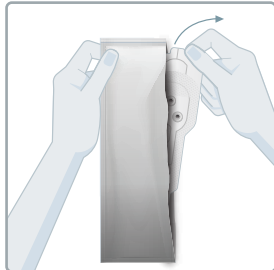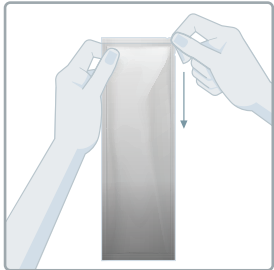



6.

Kontrollera att det inte finns skador på Faros-enheten och OmegaSnap-adaptorn*. Koppla Faros-enheten till adaptorn. Fäst adaptorn på elektroden. Tryck adaptorn mot elektroden för att försäkra dig om att alla tryckknappar är knäppta.

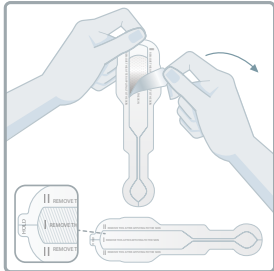


3.

Ta bort skyddsfilm från den självhäftande ytan (nummer 1). Vidrör inte den självhäftande delen.

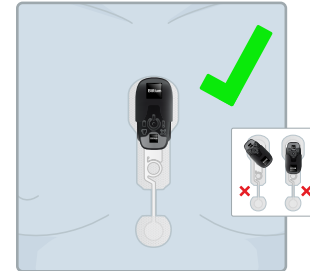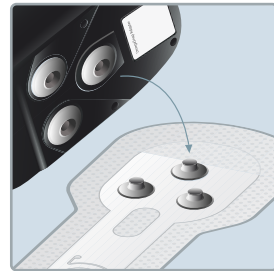


4.

Fäst elektroden på ett avstånd nedanför halsgropen som motsvarar bredden av två fingrar. Elektroden ska sitta nedanför nyckelbenet och den nedre delen ovanför mellangärdet. Vänta med att ta bort skyddsfilm nummer 2 och 3.


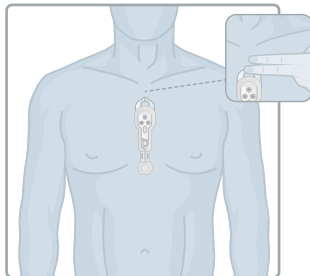


7.

Tryck kort på mittenknappen för att starta mätningen. En signalton och ett blinkande grönt ljus indikerar att mätningen har börjat.

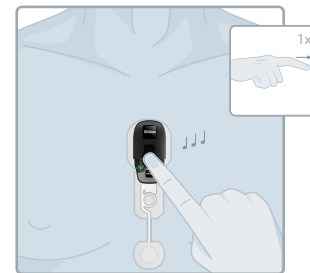

9. Koppla loss enheten och adaptorn från elektroden. Ta bort elektroden från huden genom att ta tag i den självhäftande ytans kant och försiktigt dra neråt tills hela elektroden lossnar. Använd tvål och vatten vid behov. Släng elektroden efter användning. Lämna tillbaka Faros-enheten och adaptorn till den behandlande läkaren eller kliniken.

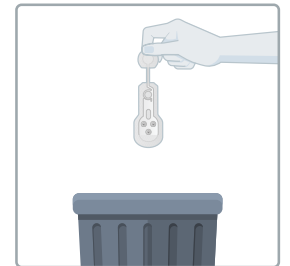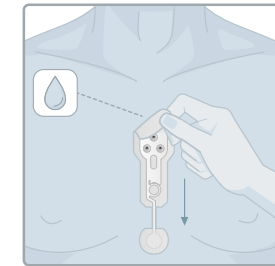

Symboler

CE-märkning	Engångsartikel
Tillverkningsdatum	Batchkod
Tillverkare	Utgångsdatum
Följ bruksanvisningen	Medicinsk produkt