


Bittium OmegaSnap™ 3-CH ECG Electrode

Bittium OmegaSnap™ EKG-elektrod med tre kanaler är avsedd att användas med enheten Bittium Faros™ 360 för att mäta EKG-s signaler.

Tillbehör

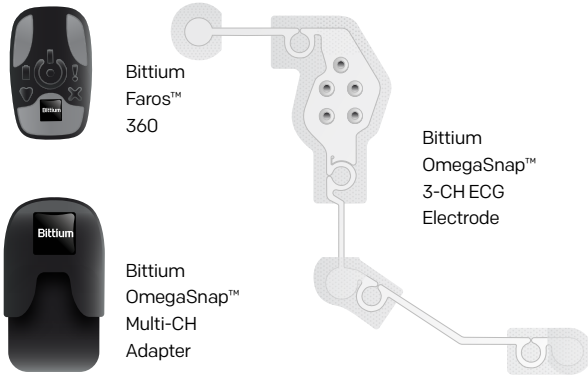

Observera

- Elektroden appliceras på frisk och ren hud.
- Använd inte fuktighetskrämer eller kosmetikprodukter på hudområdet där du fäster elektroden.
- Använd inte gamla elektroder. Kontrollera datumet på förpackningen.
- Elektroden är avsedd för engångsbruk. Återanvändning kan leda till exempel till infektion.
- Lösögör elektroden och sluta använda anordningen om de förorsakar hudirritation. Vi problem kontakta behandlande läkaren eller sjuksköterskan.
- Elektroden ska bytas ut om den inte hålls på huden.
- Ta bort elektroden efter mätningen
- Elektroden ska bara användas tillsammans med Bittium Faros-enheten.
- Faros-enheten och OmegaSnap-adaptorn ska rengöras efter användning. Rekommenderat rengöringssätt: alkoholfria rengörings- och desinfektionsdukar för medicinska produkter (till exempel mikrozid® eller SaniCloth AF3).
- Var god följ dessa bruksanvisningar. Mer information finner man i manualen för Faros-enheten.

Bittium



Bittium Biosignals Oy
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio, FINLAND




Tel: +358 (0)40 3442000
e-post: bbs@bittium.com tai
medical.support@bittium.com


www.bittium.com

Bittium OmegaSnap™ 3-CH ECG Electrode

Snabbguide

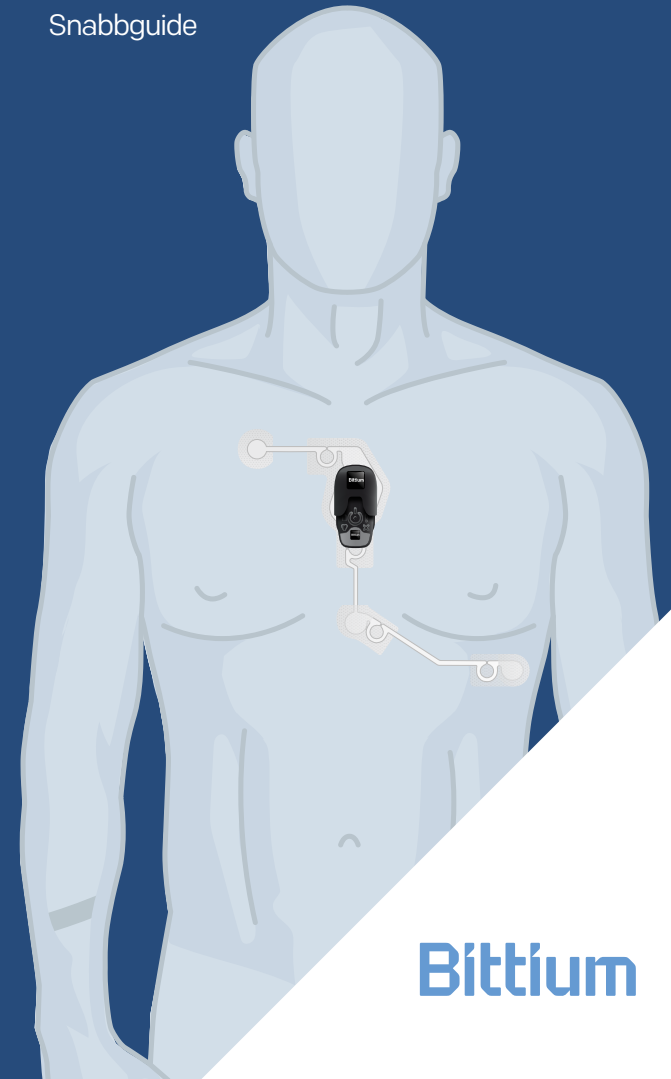




Bittium

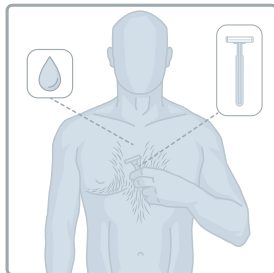

1.

Ta bort kroppsbe håring vid behov. Rengör huden enligt behandlande läkares eller kliniks anvisning. Huden ska vara ren och torr när elektroden appliceras.

2. Kontrollera att elektrodförpackningen är öppen och att datumet är giltigt. Öppna påsen och ta ut elektroden.

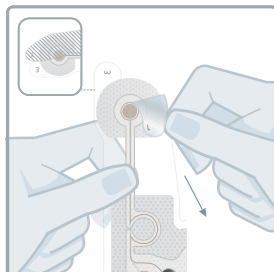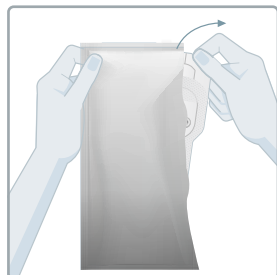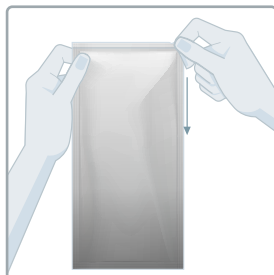


3.

Ta loss skyddsfilmen från den självhäftande ytan (nummer 1). Vidrör inte den självhäftande delen.



4.

Fäst elektroden på ett avstånd nedanför halsgropen som motsvarar bredden av två fingrar. Elektrodens övre del ska sitta nedanför nyckelbenet och den nedre delen ovanför mellangärdet. Vänta med att ta bort skyddsfilmer nummer 2 och 3.

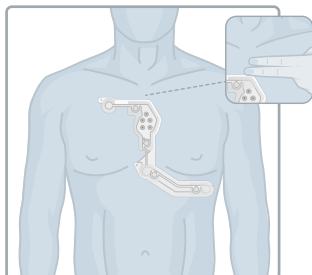



5.

När elektrodens första del sitter fast på huden, ta bort den andra skyddsfilmen (nummer 2) genom att dra åt sidan och försäkra dig samtidigt om att elektroden fästs på huden. Ta bort skyddsfilmen nummer 3 och fäst den återstående delen av elektroden på huden.

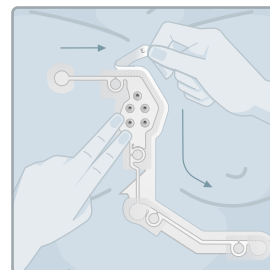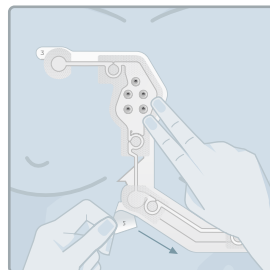


6.

Kontrollera att det inte finns skador på Faros-enheten och OmegaSnap-adaptorn*. Koppla Faros-enheten till adaptorn. Applicera adaptorn på elektroden. Tryck adaptorn mot elektroden för att försäkra dig om att alla tryckknappar är knäppta.

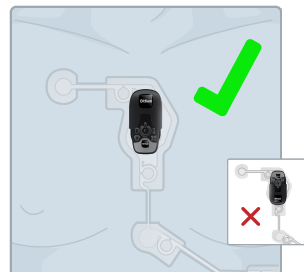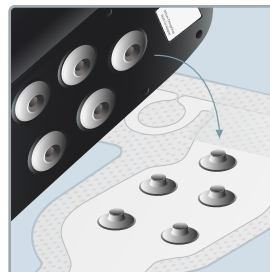


7.

Tryck kort på och släpp mittenströmknappen för att starta mätningen. En signalton och ett blinkande grönt ljus indikerar att mätningen har börjat.

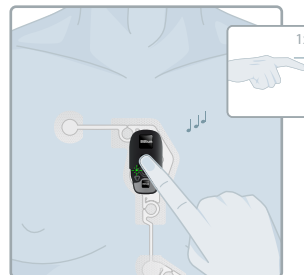



8.

När du vill avsluta mätningen, tryck på mittenknappen i cirka 8 sekunder tills du hör tre pip och det blinkande signalljuset slocknar.

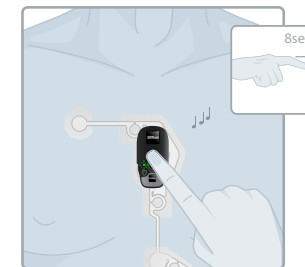

9.

Koppla loss enheten och adaptorn från elektroden. Ta bort elektroden från huden genom att ta tag i den självhäftande ytans kant och försiktigt dra neråt tills hela elektroden lossnar. Använd tvål och vatten vid behov. Släng elektroden efter användning. Lämnna tillbaka Faros-enheten och adaptorn till den behandlande läkaren eller kliniken.

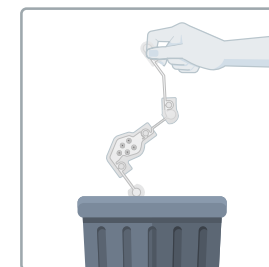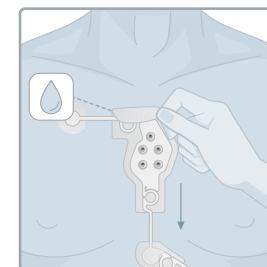

Symboler



CE-märkning



Engångsartikel



Tillverkningsdatum



Batchkod



Tillverkare



Utgångsdatum



Följ bruksanvisningen



Medicinsk produkt