
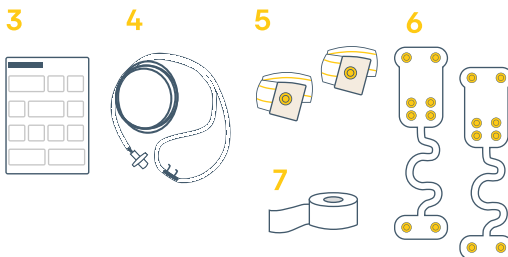


Tillbehör

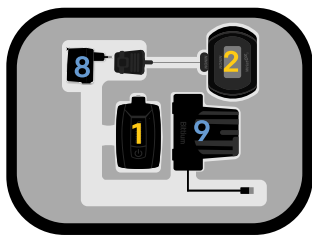

Tillbehör som behövs för registreringen:

1. Bittium Respiro™
2. Pulsoximeter
3. Snabbguiden/Observationer och Varningar
4. Näskanyl
5. Två RIP-bälten
6. Respiro™ monteringsplatta för 2 RIP-bälten och reservmonteringsplatta
7. Medicinsk tejp


Använd inte en trasig apparat eller en näskanyl vars skyddsförpackning har öppnats.


Tillbehör som behövs för att ladda Respiro (vid behov):

8. Laddare
9. Laddningsdocka


Hur du startar registreringen

Sätt fast apparaten och RIP-bälten på monteringsplattan enligt bilden. Placera RIP-bälten över skjortan.

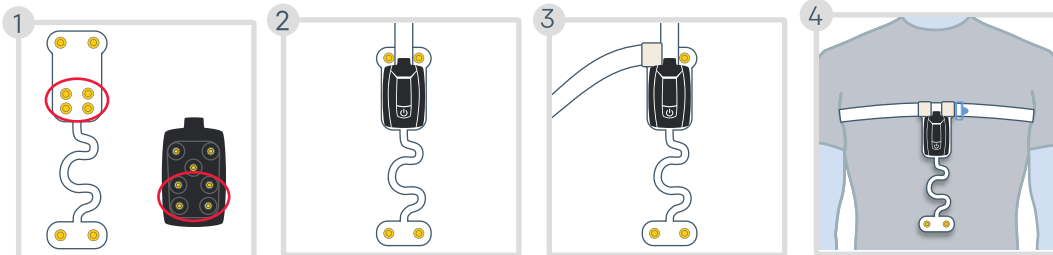


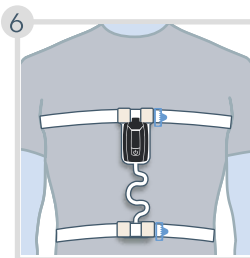

Se till att bältena inte korsar varandra.
Ett bälte över bröstet och ett över magen.

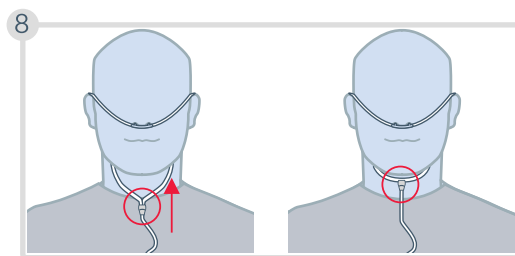


- Flytta spannaren uppåt längs kanylen för att justera passformen.
- **Risk för kvävning!** För försiktigt in kanylen i näsan enligt bilderna.
- Om kanylen har ett munstycke ska det peka mot munnen.

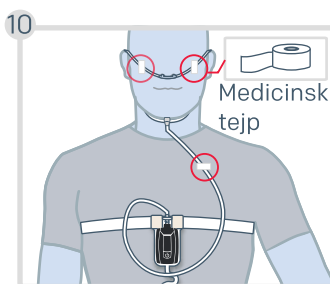

11




The diagram illustrates the correct and incorrect placement of a pulse oximeter. The top part shows a hand with a pulse oximeter clip on the index finger, with red circles highlighting the correct placement on the finger. The bottom part shows two incorrect methods: one with a red 'X' over a pulse oximeter clip on a thumb, and another with a red 'X' over a pulse oximeter clip on a wrist.

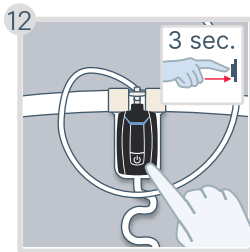


Om inspelningen är inställd på att starta automatiskt, hoppa över steg 12 och 13.

Tryck på strömbrytaren i cirka 3 sekunder tills LED-lamporna lyser blått.

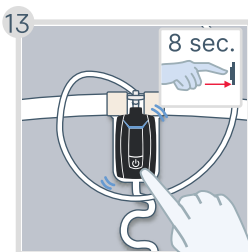


Tryck på strömbrytaren igen i cirka 8 sekunder tills enheten vibrerar en gång och LED-lamporna börjar blinka blått.

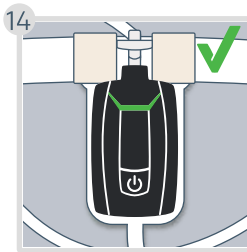

LED-lamporna lyser **grönt** ett ögonblick när registreringen framgångsrikt har påbörjats.


Lamporna släcks automatiskt efter cirka 30 sekunder om allt är OK och du ligger ner.

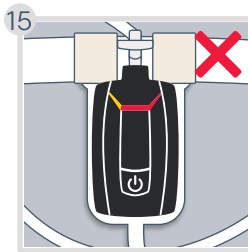

Om en enda LED-lampa blinkar **rött** eller **gult**, kontrollera att den del som motsvarar indikatorlampan är korrekt ansluten.

Förklaringar till indikatorlamporna finns på **nästa sida**.

Under registreringen

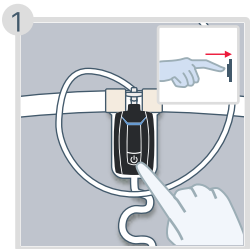


Du kan trycka kort på strömknappen för att markera väckningstidpunkter, t.ex. när du går till sängs, går på toaletten, vaknar o.s.v. (valfritt)

Sluta registreringen


Om inspelningen är inställd på att avslutas automatiskt, hoppa över steg 1.

Tryck på strömbrytaren i cirka 3 sekunder tills enheten vibrerar 3 gånger och enhetens LED-lampor lyser blått, en efter en från vänster till höger.

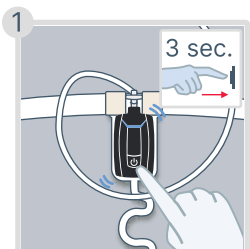

Pulsoximetern stängs av automatiskt.

Enhetens indikatorlampor kommer att vara blåa i 5 minuter, men du kan fortsätta till nästa steg.

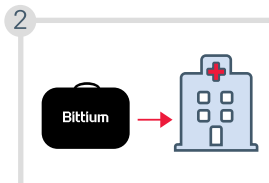

Koppla loss enheten och alla tillbehör från dig själv. Lägg tillbaka alla dina tillbehör i transportväskan och lämna tillbaka den till din klinik.

LED-indikatorlampor: Respirom sedd från framsidan

Om en enda av LED-lamporna blinkar rött eller gult, kontrollera att den del som motsvarar lysdioden är korrekt ansluten. LED-lamporna lyser grönt när anslutningarna är korrekta. Kontakta din vårdpersonal om LED-lamporna blir helt röda eller inte tänds alls.

Näskanyl



Pulsoximeter RIP-bälten



Fel i anslutningen

Fingret är inte i pulsoximeterns fingersensor

OK

Exempel

Näskanyl: OK



Pulsoximeter: Fingret är inte i pulsoximeterns fingersensor

RIP-bälten: Fel i anslutningen
Byt ut monteringsplattan om den röda lampan inte slocknar

Anslut laddningsstationen och laddaren till strömuttaget och placera Respiro i laddningsstationen för att se batteriladdningsnivån. LED-lamporna visar batteriladdningsnivån för enheten. Batteriet är tillräckligt laddat om minst två gröna LED-lampor blinkar eller om alla LED-lampor lyser kontinuerligt.

Bittium Respiro HSAT™

Monteras och distribueras för



Bittium Biosignals Ltd

Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio
Finland

evismo AG

Schweighofstrasse 409
8055 Zürich
Switzerland

